




### Aplicaciones

Los amplificadores de Bertec Corporation están diseñados para su uso con nuestra línea de plataformas de fuerza y transductores de fuerza. Su construcción sólida puede manejar las exigencias de cualquier aplicación, ya que nuestros productos se utilizan a nivel internacional en instalaciones de investigación, clínicas e industriales. El amplificador AM5800 cuenta con una entrada digital y una salida digital para facilitar la configuración y el uso.

### Diseño

El amplificador AM6500, con su perfil pequeño y fácil uso, es la elección perfecta para aquellos que necesitan datos precisos de manera rápida a un precio económico. Este convertidor externo transforma la salida digital de la plataforma de fuerza a formato USB, que puede ser conectado directamente a cualquier computadora mediante un cable USB estándar. La salida del amplificador es un conector USB tipo B estándar; mientras que la entrada analógica es un conector hembra de 9 pines.

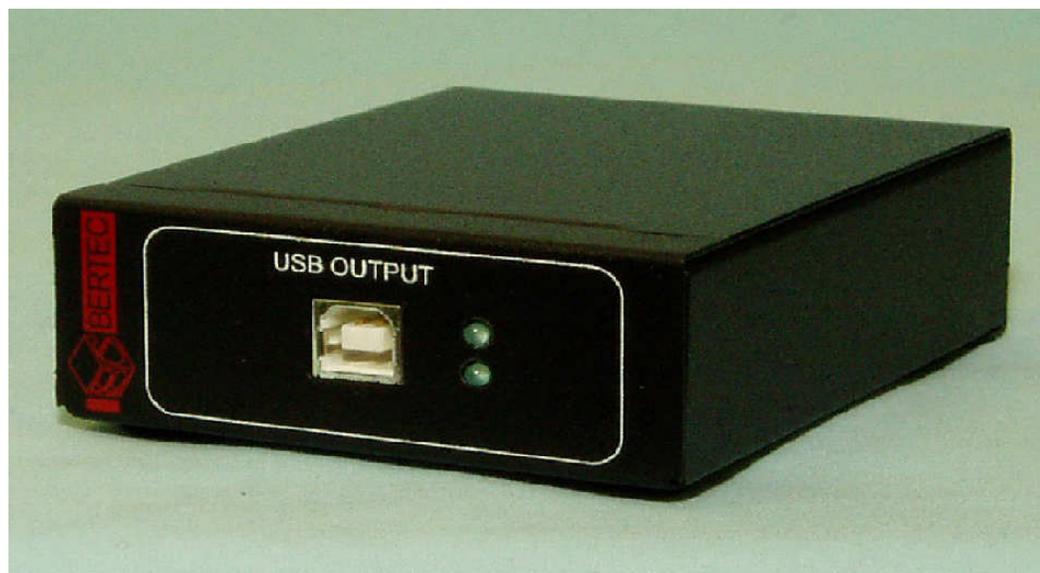

El conector es tipo D-Sub. Junto a la salida USB hay dos luces LED. La luz inferior está encendida cuando la unidad está encendida, y la luz superior está encendida si la unidad está conectada al puerto USB de la computadora. El uso del AM6500 elimina la necesidad de tarjetas convertidoras A/D durante la adquisición de datos del transductor de fuerza. En Bertec, nuestro objetivo es ofrecer la variedad que deseas con la calidad que te mereces.

