

QUATTROMANO

Masajeador de Cama de Agua / HS-30



OG Wellness

Característica 1


La configuración finamente ajustada que se adapta a diversos pacientes con diferentes condiciones y preferencias nace del concepto de "Masaje a Medida".

Imágenes

Característica Especial 1 · 2 · 3

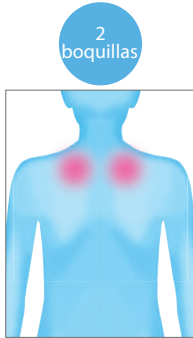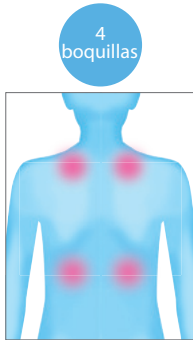

Característica Especial 4

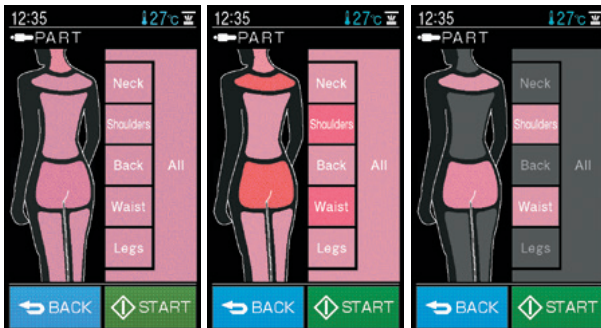

Característica Especial 1

Control de Movimiento Cuádruple para diversos tipos de anatomía

"Control de Movimiento Cuádruple" que controla con precisión los flujos de agua con el movimiento de cuatro boquillas. Ofrece masajes que se ajustan al tamaño del cuerpo al configurar la altura y la anchura de los hombros.

Característica Especial 2

4 boquillas que ofrecen masajes en dos áreas diferentes simultáneamente

Al usar 4 boquillas, se pueden masajear dos áreas diferentes al mismo tiempo. Se puede ofrecer un masaje más eficiente que con solo dos boquillas (por ejemplo, alrededor de la cuchilla del hombro y la parte trasera del pecho, la parte superior e inferior de la espalda, y la parte baja de la espalda y los muslos).

Característica Especial 3

Cambiar entre 4 boquillas y 2 boquillas permite una fuerte presión de agua

La boquilla se puede cambiar según sus preferencias durante el masaje. Cuando se usan dos boquillas, la presión del masaje es un 25% más fuerte que cuando se usan cuatro boquillas.

Característica Especial 4

Más de 200 tipos de programas de tratamiento. Más de 20 patrones de masaje

Dependiendo de la combinación de áreas de tratamiento, hay más de 200 programas de tratamiento disponibles. Con ligeras variaciones incluidas, hay más de 20 patrones de masaje para diversas partes del cuerpo.

Característica 2

Afinado para brindar un mayor nivel de seguridad y comodidad para los movimientos de transferencia y de pie

Imágenes



Special Feature 1

Fácil de mover

El área relacionada con la transferencia utiliza un asiento especializado, limitando el hundimiento al sentarse en el dispositivo. Esto reduce la inestabilidad al subir y bajar.

Característica Especial 2

Fácil de subir y bajar

Espacio abierto en el lado de la cama para el espacio de los pies. Esto permite a los usuarios llevar sus pies hacia atrás hacia la cama al ponerse de pie.

Característica Especial 3

Fácil de agarrar el marco

Considerando el agarre del borde de la cama durante la transferencia, el marco ha sido diseñado para ser fácilmente agarrado.

Característica Especial 4

Barandilla fácil de agarrar

Se incluyen barandillas largas y cortas como equipo estándar (larga: 1, corta: 2). La barandilla fácil de agarrar apoya transferencias seguras.

Característica Especial 5

Fácil de subir

La altura del asiento de 490 mm facilita incluso a las personas más pequeñas montarse.

Característica Especial 6

Tecnología patentada que alivia los movimientos desagradables durante el tratamiento

Con un diseño original anti-onda, controla los movimientos oscilantes y alivia el mareo, una preocupación para las máquinas de presión de agua durante el tratamiento.

Característica Especial 7

Panel táctil fácil de operar

Se utiliza una pantalla LCD a color para el panel táctil. La visibilidad aumentada y el diseño inteligente para operaciones mejoradas brindarán soporte al usuario.

QUATTROMANO ■ Terapia de Masaje

Especificaciones



HS-30

QUATTROMANO HS-30

HS-30SLE	Monofásico CA 200 a 240 V		
Nombre del producto	Masajeador de Cama de Agua HS-30		
Clasificación de protección	Clase I/Fijación permanente/Componente de montaje tipo B		
Fuente de alimentación nominal	Monofásico 200 V 50/60 Hz		
Entrada de energía	5.3 kVA		
Corriente nominal	30 A		
Dimensiones externas	Approx. 820 × 2330 × 840 (H) mm		
Peso	Aprox. 220 kg (aprox. 450 kg lleno de agua)		
Intensidad	5 pasos (1-5)		
Temperatura de precalentamiento	25-40 °C		
Condiciones de uso	Peso máximo: 135 kg, Temperatura ambiente: 10-28 °C		
Características adicionales	Mecanismo de control de movimiento Cuádruple, temporizador de precalentamiento, mecanismo de purga automática		
Accesorios estándar	Almohada	HS30-001	1
	Peso para tobillo	HS30-002	1
	Sábana	HS30-005	2
	Barandilla larga	HS30-003	1
	Barandilla corta	HS30-004	2

Hecho en Japón


Accesorios Opcionales



01



02

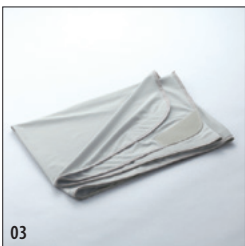

03



04



05



06

Accesorios	Nombre del producto/Número de producto/Unidad mínima de pedido	
01 Almohada	HS30-001	1
02 Peso para tobillo	HS30-002	1
03 Sábana	HS30-005	1
04 Barandilla larga	HS30-003	1
05 Barandilla corta	HS30-004	1
06 Capucha de relajación	HS30-011	1

- Los colores en este folleto pueden no ser necesariamente iguales a los del modelo real debido a las condiciones de impresión.
- Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios para mejoras sin previo aviso.
- El contenido de este catálogo es válido hasta abril de 2023.

OG WELLNESS TECHNOLOGIES CO., LTD.

<http://www.og-wellness.com>

Oficina Principal 1835-7, Miyoshi, Naka-ku, Okayama-shi, OKAYAMA 703-8261 JAPAN

Oficina Principal de Tokio Kasumigaseki Building 4F, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, TOKYO 100-6004 JAPAN

Fábrica Oku 77, Mukoyama, Oku-cho, Setouchi-shi, OKAYAMA 701-4233 JAPAN